

driveTM

www.drivemedical.com

Rev.2.12.02.15

exercise peddler
with digital display

ejercitador de pedales
con pantalla digital

pédalier exerciceur
avec afficheur

item # RTL10275




EU Authorized Representative
Drive Medical LTD
Ainley's Industrial Estate
Elland, West Yorkshire,
United Kingdom HX5 9JP

www.drivemedical.com

driveTM

assembly instructions

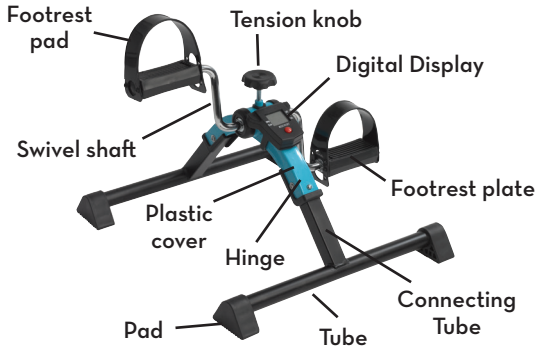

1. Remove contents from box.
2. Pull legs in opposite direction until locking button “snaps” into locking receiver (See figure A).



3. Attach digital display to the peddler by sliding the loop over the tension knob receptacle located on the top of the peddler. Push down gently on the display so the clasp on the back of the display attaches to the peddler frame. (See figure B)




4. Insert tension knob on top of peddler and turn clockwise to tighten. The tension knob will increase/decrease the amount of tension on the peddler. Tighten/ loosen to a level that feels comfortable.

5. The pedal straps have 2 sets of holes to allow you to adjust the length of the strap around your foot or shoe. (See figure C)




folding

To fold, depress push pin and fold leg inward. Repeat for second leg. (see figure D)

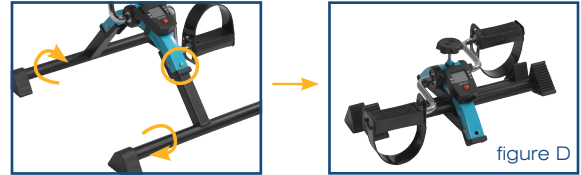

automatic operation

1. **MODE (Red Button):** This control allows you to select a particular function. To start, press and hold the Red Button for 4 seconds. The LED will display the different functions. (After a few minutes without any movement, the unit will automatically shut off).
2. To select a function, wait until the 4 second set up is complete. Push the Red Button and the arrow will move through the functions. When the desired function is selected, simply use the peddler and the unit will calculate the exercise.
3. **TIME:** Determines the amount of time the peddler has been operating.
4. **COUNTER (CNT):** Determines the amount of steps while operating the peddler.
5. **CALORIE (CAL):** Determines the amount of calories burned while using the peddler.
6. **REPS PER MINUTE (R.P.M.)** Automatically calculates the repetitions per minute.
7. **SCAN:** Will automatically review the results of all functions.

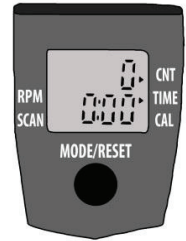

battery replacement

If the display does not come on or reads incorrectly, the battery requires replacement.

To replace the battery, use a small screw driver and remove the display panel. Turn the display panel over and remove the watch-style battery. Insert a new battery and replace the display panel.

WARNING—DEVICE MAY BECOME HOT WITH EXTENDED USE.

instrucciones/ manual de operación

Almohadilla para
apoyar los pies



1. Saque las partes de la caja.
2. Jale las patas en la dirección opuesta hasta que el botón de bloqueo “se encaje” dentro del receptor de bloqueo (vea la figura A).



3. Fije la pantalla digital al dispositivo de pedales al deslizar el aro sobre el receptáculo de la perilla de tensión ubicado en la parte superior del aparato con pedales. Empuje levemente sobre la pantalla para que el broche en la parte trasera de la pantalla se sujete al armazón del aparato con pedales (vea la figura B).



4. Introduzca la perilla de tensión sobre el ejercitador de pedal y gire en sentido de las manecillas del reloj para apretar. La perilla de tensión aumentará/ disminuirá la cantidad de tensión sobre el ejercitador de pedal. Apriete/ afloje la perilla al nivel en donde se sienta cómodo.

5. Las correas del pedal tiene 2 juegos de orificios que permiten ajustar la longitud de la correa alrededor de su pie o zapato. (Vea la figura C)




para doblarlo

Para doblarlo, presione la clavija de presión y doble la pata hacia adentro. Repita los mismos pasos para la segunda pata. (vea la figura D)



operación automática

1. **MODE (Botón rojo):** Este control le permite seleccionar una función en particular. Para iniciar, presione y mantenga presionado el Botón Rojo por 4 segundos. La pantalla LED mostrará las diferentes funciones. (Si después de encender la unidad no se realiza ninguna actividad, la unidad se apagará automáticamente).
2. Para seleccionar una función, espere hasta que pasen los 4 segundos de configuración. Presione el Botón Rojo y la flecha se desplazará a lo largo de las funciones. Cuando seleccione la función deseada, simplemente utilice su ejercitador de pedal y la unidad calculará el ejercicio que realiza.
3. **TIEMPO:** Determina el tiempo que se ha estado utilizando el ejercitador de pedal.
4. **MOSTRADOR (CNT):** Determina la cantidad de pasos al momento de estar operando el ejercitador de pedal.
5. **CALORÍAS (CAL):** Determina la cantidad de calorías quemadas al momento de estar operando el ejercitador de pedal.
6. **RÉPÉTITIONS PAR MINUTE (R.P.M):** Calcula automáticamente las repeticiones por minuto.
7. **SCAN:** Evaluará automáticamente los resultados de todas las funciones.

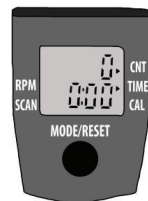


como cambiar la batería

Si la pantalla no se enciende o si las lecturas son incorrectas necesita cambiar las baterías.

Para cambiar la batería, utilice un desarmador pequeño y quite el panel de la pantalla. Gire el panel de la batería y quite la batería tipo reloj. Instale una batería nueva y vuelva a colocar el panel de la pantalla en su lugar.

ADVERTENCIA—DISPOSITIVO PUEDE CALENTARSE CON EL USO PROLONGADO.

instructions

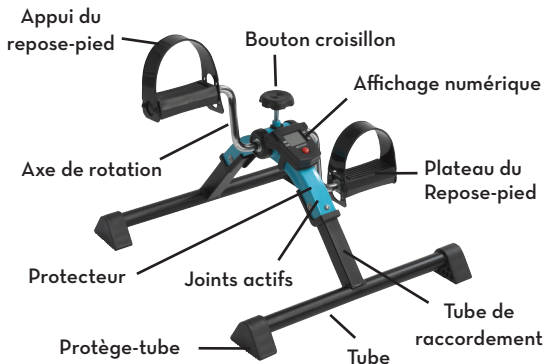

1. Retirez le contenu de la boîte.

2. Tirez les pieds dans des directions opposées jusqu'à ce que les boutons de verrouillages « cliquent » dans les orifices de verrouillage (voir illustration A).



3. Pour fixer l'afficheur numérique à l'exerciseur, glissez la boucle par-dessus le bouton de réglage de la tension situé sur le dessus de l'exerciseur. Appuyez délicatement sur l'afficheur pour que l'attache à l'arrière de l'afficheur s'engage dans le cadre de l'exerciseur (voir figure B).




4. Insérez le bouton de tension sur le dessus du pédalier et tournez dans le sens horaire pour serrer. Ce bouton augmente / diminue la tension du pédalier. Serrez ou desserrez le bouton de manière à régler l'effort à un niveau confortable.

5. La courroie de la pédale comporte deux séries de trous qui permettent d'ajuster la courroie autour de votre pied (voir figure C).




rangement

Pour replier, enfoncez le bouton à ressort et repliez le pied vers l'intérieur. Répétez pour le second pied (voir figure D).

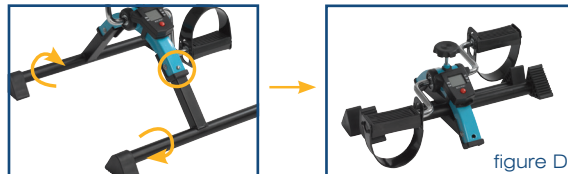

utilisation en mode automatique

1. **MODO (bouton rouge)** : Ce bouton permet de choisir une fonction particulière. Pour démarrer, appuyez sur le bouton rouge et maintenez-le enfoncé pendant quatre secondes. L'afficheur ACL affichera les différentes fonctions (l'afficheur s'éteint automatiquement s'il n'y a aucune activité).
2. Pour choisir une fonction, attendez que la mise en route de quatre secondes soit complétée. Appuyez sur le bouton rouge pour déplacer la flèche d'une fonction à l'autre. Lorsque la fonction désirée est sélectionnée, commencez à pédaler et l'afficheur indiquera votre progrès.
3. **DURÉE (TIME)**: Indique la durée d'utilisation du pédalier.
4. **COMPTEUR (CNT)** : Indique le nombre de rotations du pédalier.
5. **CALORIES (CAL)** : Indique la dépense d'énergie, en calories, découlant de l'utilisation du pédalier.
6. **CADENCE (Rotations par minutes - RPM)** : Indique le nombre de rotations du pédalier, par minute.
7. **SÉQUENCE (SCAN)**: Passe en séquence toutes les fonctions de l'afficheur.

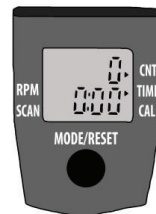

remplacement de la pile

Si l'afficheur ne fonctionne pas ou affiche incorrectement, vous devez remplacer la pile.

Pour remplacer la pile, utilisez un petit tournevis et retirez le panneau d'affichage. Faites basculer le panneau et retirez la pile de type « pièce de monnaie ». Insérez une nouvelle pile et remplacez le panneau.

ATTENTION – À L'APPAREIL PEUVENT DEVENIR CHAUDS APRÈS UNE UTILISATION PROLONGÉE.

lifetime limited warranty

Your Drive branded product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for the lifetime of the product for the original consumer purchaser.

This device was built to exacting standards and carefully inspected prior to shipment. This Lifetime Limited Warranty is an expression of our confidence in the materials and workmanship of our products and our assurance to the consumer of years of dependable service.

This warranty does not cover device failure due to owner misuse or negligence, or normal wear and tear. The warranty does not extend to non-durable components, such as rubber accessories, casters, and grips, which are subject to normal wear and need periodic replacement.

If you have a question about your Drive device or this warranty, please contact an authorized Drive dealer.



© 2015 Medical Depot, Inc. All rights reserved.
Drive is a trademark of Medical Depot, Inc.
Port Washington N.Y. 11050 USA Made in China

garantía limitada de por vida

Su producto marca Drive está garantizado de por vida del producto por el comprador-consumidor original de no tener defectos en los materiales y la fabricación.

Este aparato fue construido de acuerdo a estándares rigurosos y cuidadosamente inspeccionado previo a su envío. Esta Garantía Limitada de por Vida es una expresión de nuestra confianza en los materiales y la fabricación de nuestros productos y nuestra seguridad para el consumidor dada por años de servicios confiables.

Esta garantía no cubre fallas del aparato debidas a mal uso o negligencia por parte del propietario o por el uso y desgaste normales. Esta garantía no se extiende a los componentes no durables, tales como los accesorios de goma, rueditas y mangos que están sujetos a desgaste normal y necesitan reemplazo periódico.

Si usted tiene preguntas acerca de su aparato Drive o esta garantía, por favor contacte a un representante autorizado de Drive.



©2015 Medical Depot, Inc. Todos los derechos reservados.
Drive es marca registrada de medical depot, Inc.
Port Washington NY 11050 USA Hecho en China

garantie à vie, limitée

Ce produit Drive est garanti exempt de tout défaut de matériau, de fabrication ou de main d'oeuvre pour la vie du product pour l'acheteur de consommateur original.

Cet appareil a été fabriqué selon des normes de qualité rigoureuses et inspecté avant de quitter l'usine. Cette garantie à vie limitée, est un témoignage de la confiance que nous portons aux matériaux, à la main d'oeuvre, ainsi qu'aux procédés de fabrication requis pour produire nos appareils afin qu'ils puissent vous assister de manière fiable et sécuritaire pendant de nombreuses années.

Cette garantie ne peut être invoquée dans les cas d'usage inapproprié de l'appareil, en cas de négligence ou d'usure normale. Cette garantie ne couvre pas les pièces qui, de par leur nature, ont une durée de vie plus courte, tel que les embouts de caoutchouc, poignées de mousse, roues et pneus, qui doivent être périodiquement remplacés.

Pour toute question sur cet appareil ou sur sa garantie, veuillez svp, contacter votre détaillant autorisé de produits Drive.



© 2015 Medical Depot, Inc. Tous droits réservés.

Drive est une marque de commerce de Medical Depot, Inc.
Port Washington, NY 11050 USA Fabriqué en Chine

A large, vertical version of the Drive logo, oriented sideways. The word "drive" is written in white, lowercase letters against a dark blue background. A small yellow and orange square is positioned above the letter 'i'. A trademark symbol (TM) is located at the top right of the word.